

ご利用者、ご家族、施設スタッフ、
すべての人の安心につながる見守りシステム



離れていても
状態がわかって安心！

平成30年
山形県福工連携
安心介護モデル

クラウド型睡眠見守りシステム

まもる〜のHOME  cloud

まもる〜のHOME は、在宅介護向けクラウド型睡眠見守りシステムです。

センサーが利用者様の睡眠・離床、部屋の環境を的確にとらえ、
離れた場所にいるご家族や、介護施設のスタッフにお知らせします。




ご利用者、ご家族、施設スタッフ、 すべての人の安心につながる見守りシステムです

まもる〜のHOMEは、在宅介護向けクラウド型睡眠見守りシステムです。
まもる〜の本体とベッドのマットレス下に設置したセンサーで、
利用者様の睡眠・離床、部屋の環境を的確にとらえ、
離れた場所にいるご家族や、介護施設のスタッフにお知らせします。

ご利用者様本人、ご家族、介護施設スタッフ、
それぞれの不安や負担を軽減する先進システムです。



ご利用イメージ

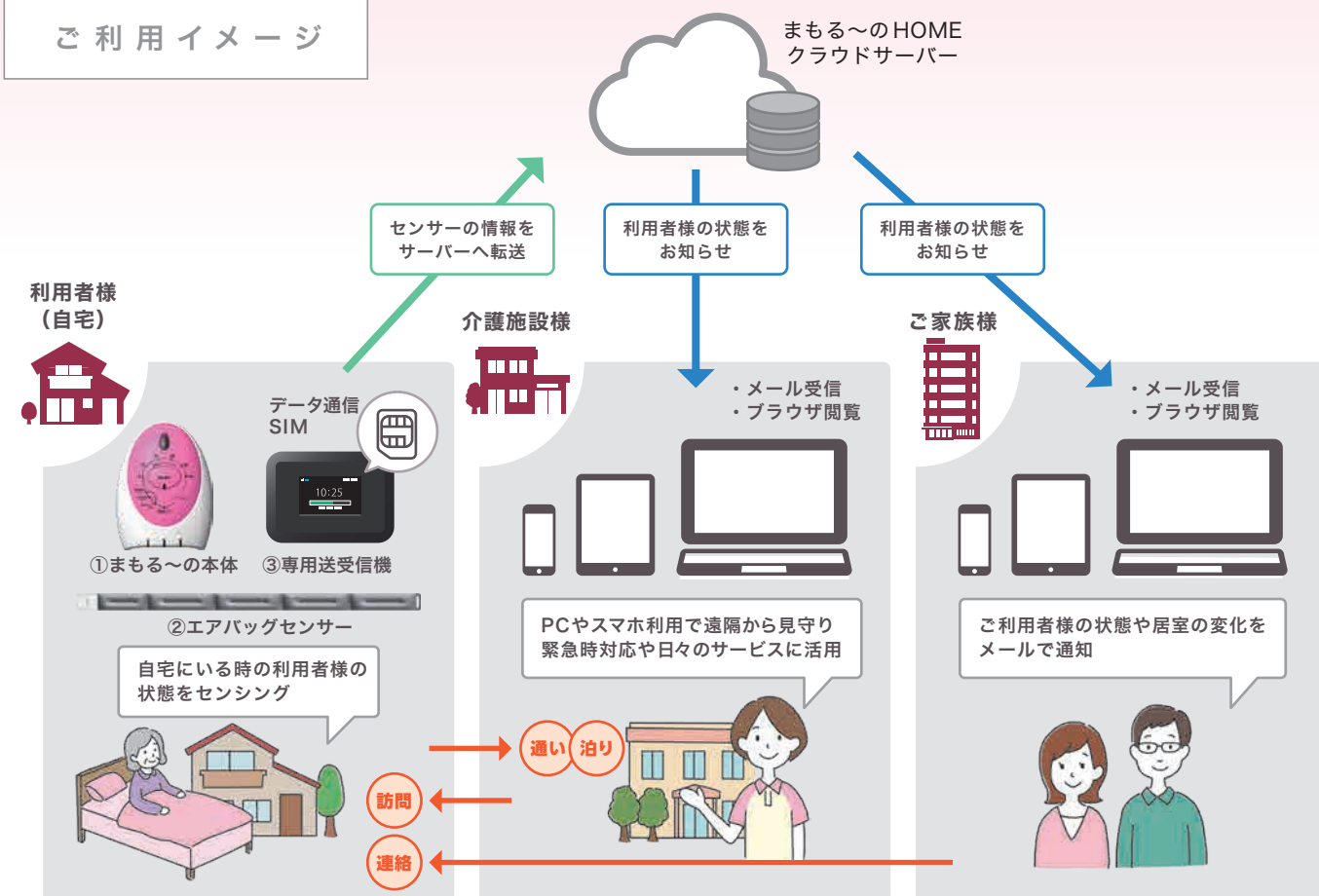

もしもの時のオプションサービス



ALSOKホームセキュリティ「かけつけサービス」

ご連絡を受け（有償）、ご自宅のご利用者様のもとへ
ガードマンがかけつけます。

※ALSOK かけつけサービス（有償）をご希望の場合は、
別途 ALSOK とホームセキュリティの契約が必要となります。



機能

3つのわかる：1 離床がわかる

マットレス下の高感度エアバッグセンサーで離床や不在をお知らせします

モニタリング画面



利用者様の状態をアイコンでお知らせします



状態モニター（利用者様の呼吸・脈拍に相当する信号レベルをモニターします）



3つのわかる：2 環境がわかる

部屋の温度・湿度・照度を常にモニターしてお知らせします

モニタリング画面




環境情報（居室の温度を計測します）



3つのわかる：3 睡眠がわかる

入床・入眠・離床をグラフで表示します
1ヵ月分のデータが一覧でき、睡眠の傾向が一目で分かります

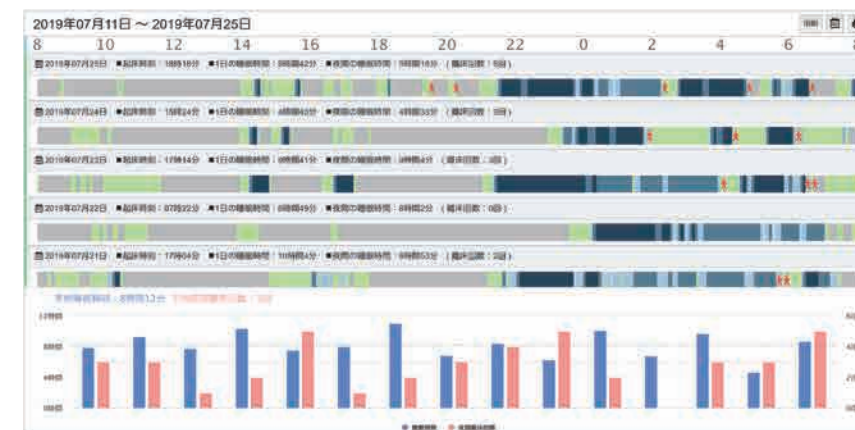

メール通知機能

利用者様の状態の変化をメールで通知いたします。

- 入眠した
- 起床した
- 離床した
- 夜間に多く覚醒している

利用者様の居室の変化をメールで通知いたします。

- いつも起床する時間に起きない
- 居室が高温になっている
- 居室が低温になっている

実績（一例）



小規模多機能いこいのつるかめ
【山形県天童市】

睡眠状況を客観的に把握！
事故予防・服薬再考にも！



小規模多機能居宅介護支援事業所 ロジェおおやま
【山形県西村山郡河北町】

自宅滞在中の生活状況も把握！
施設稼働率の向上も！



小規模多機能ホームぐるんとびー駒寄
【神奈川県藤沢市】

利用者様の尊厳と自由
(人が人としていられる)を保つ一助に！

仕様

まもる〜のHOME SS-300

■本体

環境センサー	照度、温度、湿度（参考値）
電源	専用ACアダプター（AC100V50/60Hz）
使用温湿度範囲	-10℃～+50℃/10～85%（結露なきこと）
保存温湿度範囲	-20℃～+60℃/10～85%（結露なきこと）
外形寸法	122mm×90mm×37mm
質量	約120g

■エアバッグセンサー

体動検出方式	エアバッグ方式圧力変動検知
使用温湿度範囲	+5℃～+40℃・30～85%RH
保存温湿度範囲	-10℃～+50℃・30～60%RH
外形寸法	約950mm×50mm ケーブル長約2m
質量	約120g

■専用送受信機 MH-T001（別売）

※在宅でご利用の場合は必ずセットでご使用ください。

■推奨ブラウザ

PCご利用の場合

Google Chrome 最新版
Microsoft Edge
Safari 4.0 以上
Firefox 最新版
Opera 最新版

スマートフォンご利用の場合

iOS9以降のSafari
Android5.0以降のChrome

フィーチャーフォンご利用の場合

iHTTPS通信プロトコルTLS1.2をサポートしているブラウザでの閲覧を推奨

■カラーバリエーション



まもる〜のは設置場所やお好みに合わせて4色のカラーバリエーションを用意しております。

注意事項

- ・本製品はインターネットを通じて、ご利用者様の状態を遠方で把握する見守り機器です。
- ・本製品は診断や治療を行うための医療機器ではありません。
- ・データ通信サービスは1台ごとに別途個別契約が必要です。
- ・製品の仕様やデザインは予告なく変更する場合があります。

まもる〜のHOME(福祉用具対象品)SS-300Tについて

福祉用具貸与対象品の機種もご用意しております。

- ・TAISコード：01952-0001
- ・種目：認知症老人徘徊感知機器

※詳細はお問い合わせください。

株式会社 まもる〜の

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-16バルK2ビル3F
Tel03-5817-8767 Fax03-6284-2421

<https://mamoruno.miel.care/>

