

オンキヨーブランドの聴こえサポート商品第一弾として、  
軽度～中等度の聴力に対応したコンパクトで目立ちにくい耳あな型補聴器を発売



商品名	型番	用途	カラー	希望小売価格(税別)	発売予定時期
耳あな型補聴器	OHS-D21L	左耳用	ベージュ	¥49,800	2019年2月下旬
	OHS-D21R	右耳用		¥49,800	2019年2月下旬

オンキヨー&パイオニア株式会社（所在地：東京都墨田区、代表取締役社長：宮城謙二）は、オンキヨーブランドの聴こえサポート事業参入への第一弾として、軽度～中等度までの幅広い聴力に対応した、耳あな型補聴器「OHS-D21シリーズ」を発売します。


当社は、Pioneer ブランドで、補聴器の「イヤートナー」、集音器「フェミ」やテレビの音が手元で聞こえる「快テレ君」、といった聴こえサポート商品を、日本国内を中心に(一部海外地域においても)展開し、数多くのお客様にご愛顧頂いていますが、現状の製品ラインナップや販売チャネルだけでは事業的には十分ではありませんでした。新たな販売チャネルに対しアプローチする為、“音”を活用した商品として中高齢者にも認知度が高いオンキヨーブランドの補聴器 OHS-D21 シリーズを市場導入します。急速な高齢化が進む日本では、難聴者の補聴器装着率は 14%程度\*<sup>1</sup>しかありませんが、オーディオメーカーの“音”へのノウハウを活かすことで、お客様の日常生活を豊かで楽しくお過ごしいただくためのサポート・ご提案を行ってまいります。

【主な特長】

1) コンパクトで目立ちにくい

耳穴にすっぽり入るコンパクトサイズ\*、本体色はベージュにすることで、装着していても目立ちにくくなっています。

\*本体サイズ：幅 17×高さ 13×奥行 9mm

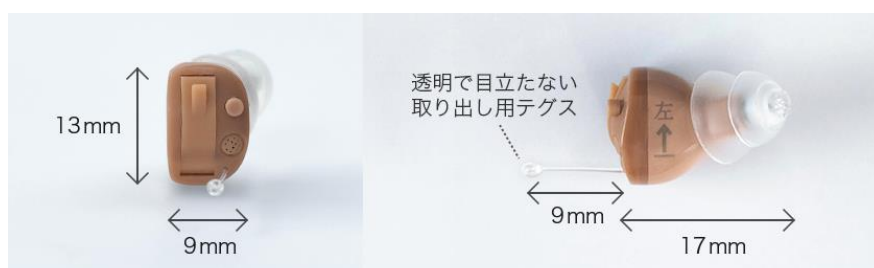

画像は左耳用



オンキヨー&パイオニア株式会社

## 2) 左右別形状で快適な装着感

耳の形状に合わせるために左右別々の形状とし、装着感を高めるためにイヤードームを大・中・小の 3 サイズを同梱していますので、お客様が装着された時のフィット感を高められます。



## 3) 軽度～中等度難聴まで幅広い聴力に対応

高出力の最大音響利得 49dB を実現することで中等度難聴の方でも安心してお使いいただけます。


## 4) 雑音の抑制機能

補聴器に入ってくる音を周波数ごとに 8 分割にして処理することによって、不要な生活雑音は抑え、聴きたい音や会話をより自然で滑らかに聴くことができます。

## 5) ハウリング抑制機能


デジタル特性を活かした強力なハウリング抑制機能を搭載しており、不快な「ピー」音を抑制します。

### ■ ハウリング抑制機能のイメージ

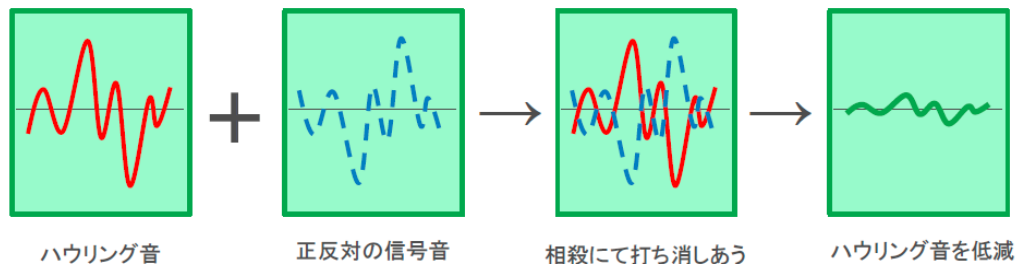

## 6) プッシュボタンで音量切り替え

ボタンを押すだけで、聴力に合わせて音量を 4 段階で切り替えることができます。

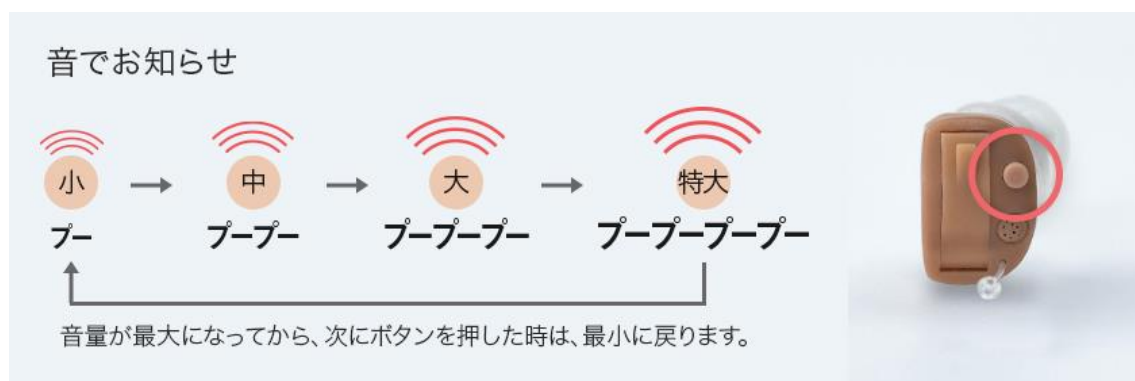

## 【主な仕様】

商品名	耳あな型補聴器
製品型番	OHS-D21L(左耳用)、OHS-D21R(右耳用)
90dB 最大出力音圧レベル ピーク値 高周波数平均値	116dB SPL 112dB SPL
最大音響利得 ピーク値 高周波数平均値	55dB 49dB
等価入力雑音レベル	21dB
全高調波ひずみ率 500Hz における値 800Hz における値 1600Hz における値	2% 2% 1%
動作電圧	1.3V
消費電流値	1.0mA 以下
使用空気電池	PR41
電池使用時間	約 150 時間
本体の寸法および重さ (電池を含まず)	幅 17×高さ 13×奥行 9 mm 約 0.9g
付属品	ドーム (小・中・大) 各 1、化粧ケース 1、お試用空気電池 2、 取扱説明書 1、保証書 1、掃除ブラシ 1
医療機器認証番号	230ABBZX00073A02

※製品詳細は、以下の製品ホームページをご覧ください。

<https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hearing/ohsd21/>

## 【関連リンク】

- オンキヨー、聴こえをサポートする事業への参入について

[https://www.jp.onkyo.com/news/information/topics/20181126\\_PR\\_Onkyo\\_kikoe\\_support.pdf](https://www.jp.onkyo.com/news/information/topics/20181126_PR_Onkyo_kikoe_support.pdf)

\*<sup>1</sup> 出典：Japan Trak2018

※この内容に関するお問い合わせ先※

## ・お客様相談窓口

商品に関するお問い合わせ、購入前のご相談などは、下記へお問い合わせください。

オンキヨー補聴器サポートセンター TEL 0800-000-4133

受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日・弊社休日を除く)