


## オンキヨーブランドの聴こえサポート製品 コンパクトで目立ちにくい耳あな型補聴器が前年比\*300%を越え販売絶好調！

\*2020年6月～8月

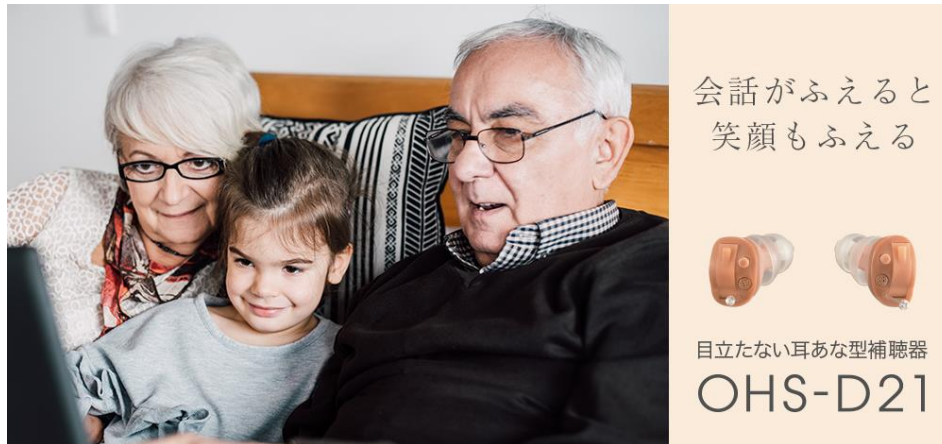

オンキヨーブランドの聴こえサポート事業参入への第一弾として導入した、軽度～中等度までの幅広い聴力に対応した耳あな型補聴器「OHS-D21 シリーズ」が販売好調を受け、直近3か月間（2020年6月～8月、8月は見込み）は前年比300%を超える見込みで推移していることをお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、マスクや仕切りを使用し、人との距離を取る新しい生活様式が始まりましたが、それにより聞き取りにくい状況も増えてきており、その不便さを解消する為、補聴器を求められるお客様が増えています。また、より多くのお客様にお届けできるよう店頭だけでなくオンラインでの販売チャネルを拡大していたことに加え、昭和のステレオ全盛時代にオーディオを謳歌したシニア世代の皆様がオンキヨーブランドに馴染み深いこともあって、お買い求めが増加しました。

今後もオーディオメーカーの“音”へのノウハウを活かすことで、お客様の日常生活を豊かで楽しくお過ごしいただくためのご提案を行ってまいります。

### 【OHS-D21 シリーズ 主な特長】

#### 1) コンパクトで目立ちにくい

耳穴にすっぽり入るコンパクトサイズ、本体色はベージュにすることで、装着していても目立ちにくくなっています。



\*本体サイズ：幅 17×高さ 13×奥行 9mm

## 2) 左右別形状で快適な装着感

耳の形状に合わせるために左右別々の形状とし、装着感を高めるためにイヤードームを大・中・小の3サイズを同梱していますので、お客様が装着された時のフィット感を高められます。



## 3) 軽度～中等度難聴まで幅広い聴力に対応


高出力の最大音響利得 49dB を実現することで中等度難聴の方でも安心してお使いいただけます。

## 4) 雑音の抑制機能

補聴器に入ってくる音を周波数ごとに8分割にして処理することによって、不要な生活雑音は抑え、聴きたい音や会話をより自然で滑らかに聴くことができます。


## 5) ハウリング抑制機能

デジタル特性を活かした強力なハウリング抑制機能を搭載しており、不快な「ピー」音を抑制します。

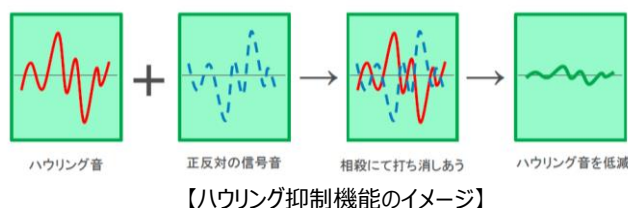

## 6) プッシュボタンで音量切り替え

ボタンを押すだけで、聴力に合わせて音量を4段階で切り替えることができます。

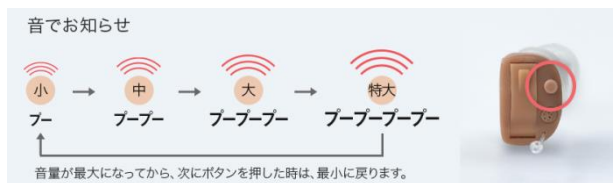

### 【主な仕様】

商品名	耳あな型補聴器
製品型番	OHS-D21L(左耳用)、OHS-D21R(右耳用)
90dB 最大出力音圧レベル	
ピーク値	116dB SPL
高周波数平均値	112dB SPL
最大音響利得	
ピーク値	55dB
高周波数平均値	49dB
等価入力雑音レベル	21dB
全高調波ひずみ率	
500Hz における値	2%
800Hz における値	2%
1600Hz における値	1%
動作電圧	1.3V
消費電流値	1.0mA 以下
使用空気電池	PR41
電池使用時間	約 150 時間
本体の寸法および重さ (電池を含まず)	幅 17×高さ 13×奥行 9 mm 約 0.9g
付属品	ドーム (小・中・大) 各 1、化粧ケース 1、お試用空気電池 2、取扱説明書 1、保証書 1、掃除ブラシ 1
医療機器認証番号	230ABBZX00073A02

※製品詳細は、以下の製品ホームページをご覧ください。

<https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hearing/ohsd21/>

【関連リンク】

- オンキヨー、聴こえをサポートする事業への参入について（2018年11月26日発表）

[https://www.jp.onkyo.com/news/information/topics/20181126\\_PR\\_Onkyo\\_kikoe\\_support.pdf](https://www.jp.onkyo.com/news/information/topics/20181126_PR_Onkyo_kikoe_support.pdf)

以上

● お客様相談窓口

商品に関するお問い合わせ、購入前のご相談などは、下記へお問い合わせください。

オンキヨー補聴器サポートセンター TEL 0800-000-4133

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日・弊社休日を除く）